


NIRFlex N-500

Calibrazione per Farina di Grano Tenero



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BUCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.

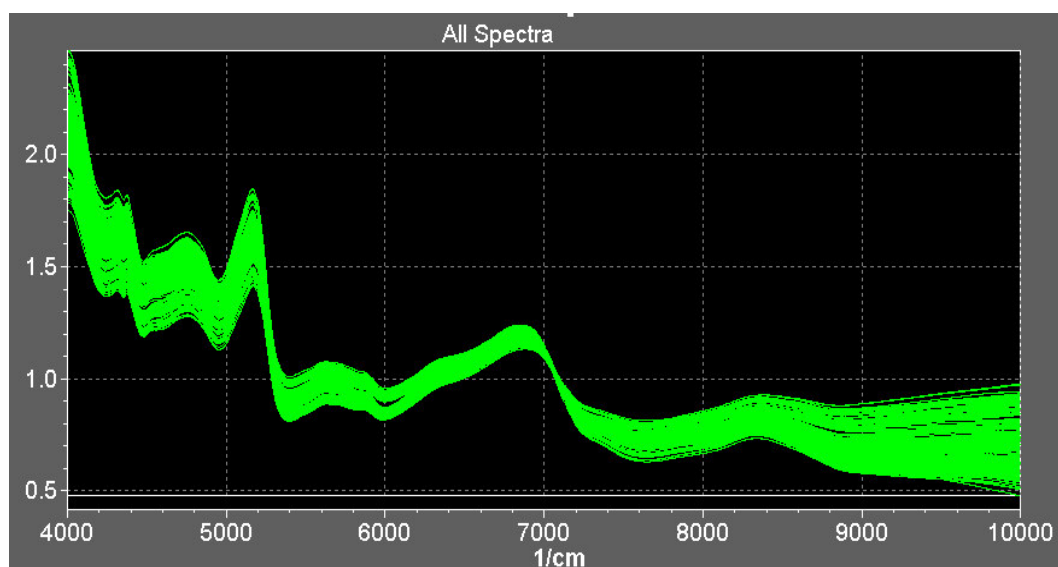

Parameter	No. of samples for calibration	Calibration range	SEP	SEE	r-coeff
Moisture	440	9.4 - 14.7%	0.28	0.28	0,967
Ash	308	0.31 - 1.28%	0.03	0.03	0.993
Protein	372	7.3 - 17.4%	0.22	0.22	0.996
Particle Size	68	19.9 - 57.1 μ m	1.77	1.41	0.994

