


# NIRFlex N-500

## Calibrazione per Misto Uovo



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BUCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.

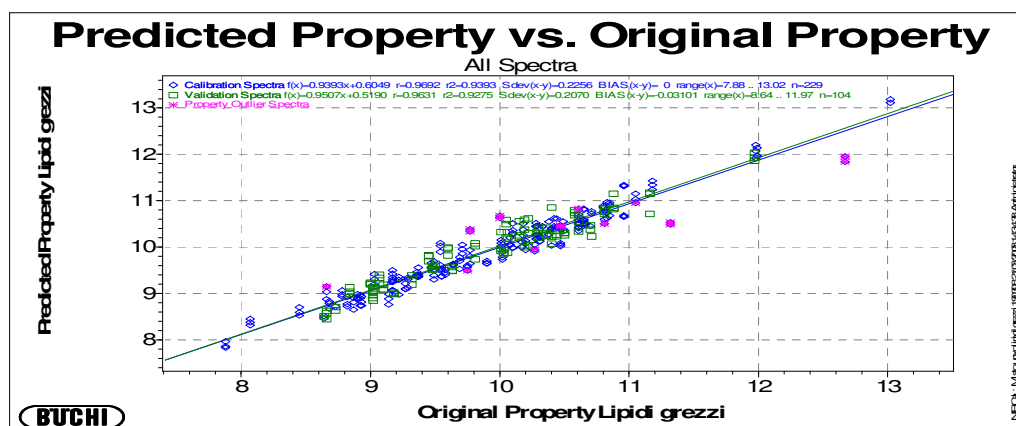

Parametro	Campioni in calibrazione	Intervallo di misura (%)	SEE	SEP	Coefficiente correlazione
Umidità	150	72 - 78	0.2	0.2	0.95
Proteine	150	10 - 13	0.3	0.3	0.90
Lipidi	300	7.8 - 13.2	0.2	0.2	0.96
Steroli	250	0.344 - 0.391	0.01	0.01	0.93
Ph	150	7.3 - 7.7	0.07	0.07	0.75