


NIRFLex N-500 Calibrazione per Peperoncino



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BUCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.

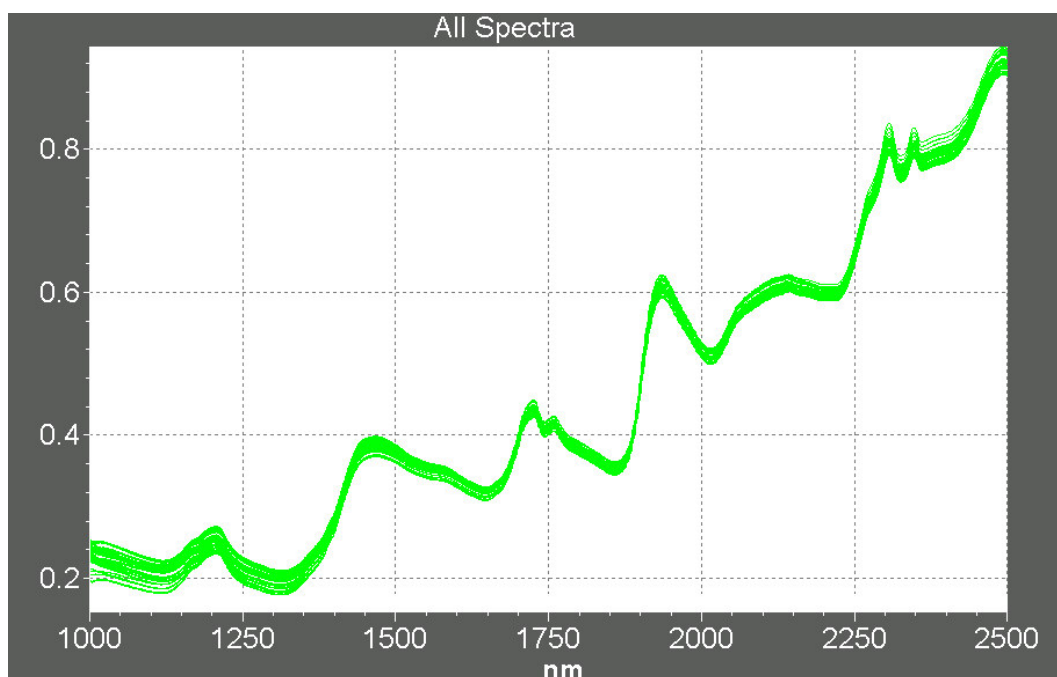

Parameter	No. of samples for calibration	Calibration range[%]	SEP	SEE	r-coeff
Capsaicin	39	0.08-0.46%	0.0056	0.0013	0,999

Calibration for Capsaicin calculated with Büchi NIRCal

