


NIRFlex N-500

Studio di Fattibilità


Succhi di Frutta

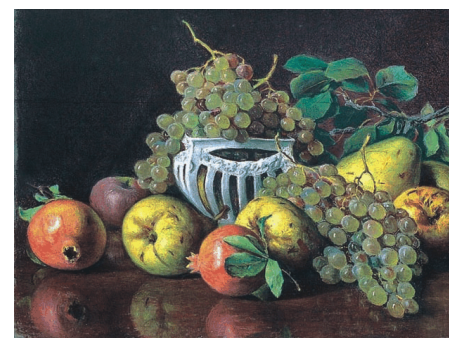

Lo studio di fattibilità, è il primo passo per verificare l'applicabilità della spettrofotometria NIR per l'analisi di nuovi prodotti.

Uno dei vantaggi del BUCHI NIRFlex N-500, è che potete contare sulla nostra esperienza per effettuare prove sui vostri prodotti, verificando le potenzialità della tecnica sulle sostanze di Vostro interesse.

Il presente lavoro evidenzia la buona correlazione tra gli spettri NIR e le analisi di riferimento, dimostrando le potenzialità dell'applicazione.

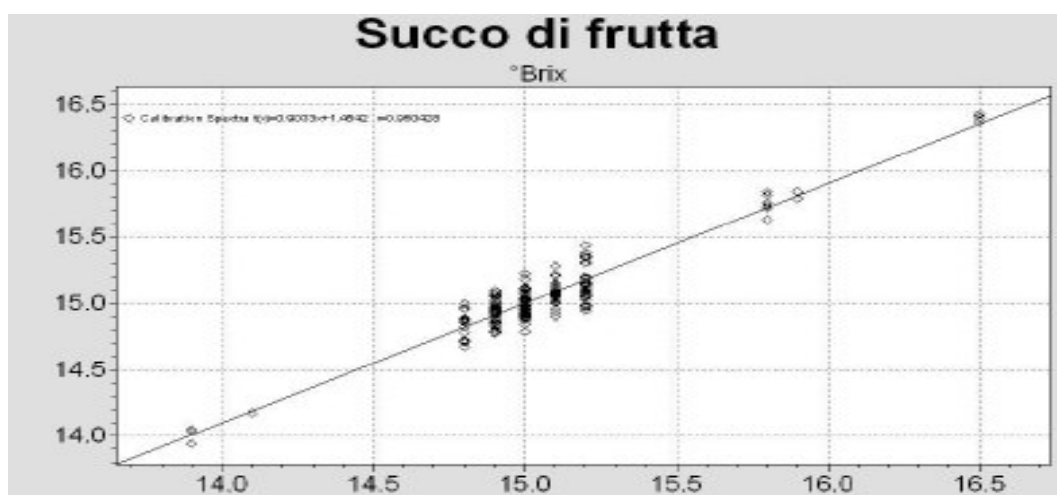

Parametro	Intervallo di Misura	SEC / SEE	Coefficiente di Regressione R
°Brix	11,6 – 16,5	0,16	0,97