



NIRFlex N-500 Calibrazione per Farina di Girasole

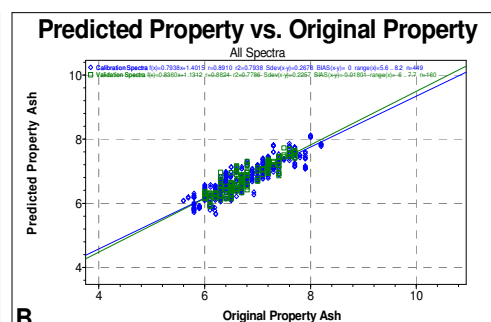

Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BÜCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.

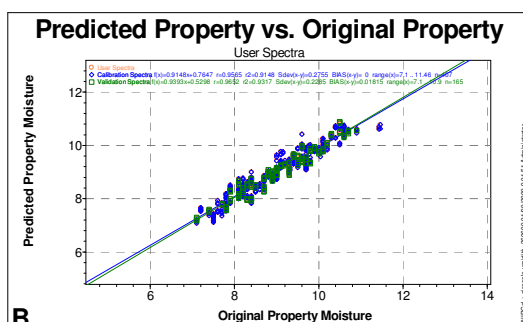

Parametro	Intervallo di misura (%)	SEC	SEP	Coefficiente correlazione
Umidità	7.1 – 11.46	0.27	0.23	0.93
Proteine	26.4 – 40.1	0.96	0.92	0.71
Ceneri	5.6 – 8.2	0.26	0.22	0.77
Fibre	14.5 – 26.4	1.5	1.5	0.73
Grassi	0.5 – 4.1	0.24	0.25	0.93